



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

B.T.S. Analyses de Biologie Médicale

E4 – U41

Bases scientifiques et technologiques de la biologie médicale

Biochimie

SESSION 2011

Durée : 3 heures

Coefficient : 2

Aucun document autorisé.

Document à rendre avec la copie :

Le document 2 est à rendre avec la copie.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Le sujet se compose de 7 pages, numérotées de 1/7 à 7/7.

BTS Analyses de Biologie Médicale		Session 2011
E4 – U41 : B.S.T.B.M. (BIOCHIMIE)	Code : 11ABE4BC1	Page : 1/7

QUELQUES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE

Le suivi de grossesse vise à détecter et prévenir les complications dites gravidiques pouvant affecter le fœtus et/ou la mère.

Les laboratoires d'analyses médicales sont largement impliqués dans la mise en œuvre de ce suivi et de ses différents aspects microbiologique, hématologique, immunologique et biochimique.

On aborde ici les aspects biochimiques des complications possibles de la grossesse.

1. Diabète gestationnel.

(14 points)

D'après l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le diabète gestationnel est défini comme un trouble de la tolérance glucidique diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse. Il conduit à une hyperglycémie de sévérité variable.

1.1 Test d'hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO)

Le diagnostic de diabète gestationnel est effectué par un test d'hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) réalisé entre la 24^{ème} et la 28^{ème} semaine d'aménorrhée (arrêt des règles).

1.1.1. Donner le principe de ce test.

1.1.2. Les prélèvements sanguins en vue de la détermination de la glycémie sont réalisés sur fluorure de sodium. Préciser l'intérêt de l'utilisation du fluorure de sodium.

1.1.3. L'absorption intestinale du glucose au niveau des entérocytes met en jeu d'une part un transport actif secondaire sodium-dépendant permettant l'entrée du glucose dans l'entérocyte et d'autre part un transport facilité du glucose permettant son passage dans le capillaire sanguin.

1.1.3.1. Présenter sous forme d'un schéma annoté l'absorption intestinale du glucose, en précisant l'orientation des gradients électrochimiques du glucose et du sodium.

1.1.3.2. Donner les caractéristiques de chacun des transports schématisés.

1.2 Dosage enzymatique du glucose

La glycémie de la patiente est déterminée sur les échantillons plasmatiques collectés. On utilise une méthode enzymatique à la glucose oxydase (kit RTU®), réalisée suivant l'extrait de fiche technique fournie dans le document 1.

1.2.1. Écrire la formule semi-développée du β -D-glucopyranose selon la représentation de Haworth.

1.2.2. Donner l'ordre de grandeur de la glycémie normale.

1.2.3. La fiche technique précise la linéarité du dosage.

Expliquer l'intérêt de cette donnée.

1.2.4. Préciser le type de dosage mis en jeu dans ce kit en le justifiant.

1.2.5. Expliquer et justifier la mention suivante de la fiche technique : Peroxydase $\geq 300 \text{ U.L}^{-1}$ et Glucose oxydase $\geq 10\,000 \text{ U.L}^{-1}$

1.2.6. Expliquer le rejet de tout échantillon visiblement hémolysé.

1.3 Traitement du diabète gestationnel par l'insuline

Le traitement du diabète gestationnel associe des injections d'insuline à un régime alimentaire jusqu'à l'accouchement.

BTS Analyses de Biologie Médicale		Session 2011
E4 – U41 : B.S.T.B.M. (BIOCHIMIE)	Code : 11ABE4BC1	Page : 2/7

L'insuline est une hormone peptidique.

1.3.1. Préciser l'organe et les cellules produisant l'insuline.

1.3.2. Indiquer et justifier la localisation du récepteur d'une hormone peptidique sur une de ses cellules cible.

1.3.3. Compléter le **document 2 (à rendre avec la copie)**, en précisant l'effet inhibiteur (-) ou activateur (+) de l'insuline sur les différentes voies métaboliques présentées ainsi que sur le captage musculaire du glucose.

1.3.4. Le dosage de l'hémoglobine glyquée HbA1c peut être utilisé pour contrôler l'efficacité et le suivi du traitement du diabète.

1.3.4.1. Expliquer le terme « glyquée ».

1.3.4.2. Citer une méthode de dosage de l'hémoglobine glyquée.

1.3.4.3. Préciser l'intérêt de ce dosage et indiquer la façon d'exprimer le résultat.

2. Complications rénales au cours d'une grossesse

(13 points)

Ces complications présentent un risque vital pour la mère et le fœtus. Elles se développent progressivement conduisant à une insuffisance rénale, puis placentaire, pouvant conduire à un accouchement prématuré.

2.1 L'hyperuricémie

2.1.1. Donner l'origine métabolique de l'acide urique.

2.1.2. Préciser les conséquences d'une hyperuricémie aux niveaux rénal et articulaire.

2.2 L'altération de la fonction rénale

Le dosage de la créatinine plasmatique permet d'explorer la fonction rénale.

2.2.1. Préciser l'origine métabolique de la créatinine.

2.2.2. Définir la clairance rénale d'une molécule et donner la formule littérale de son calcul en précisant les unités.

2.2.3. Présenter le comportement du néphron vis-à-vis de la créatinine.

En déduire l'intérêt de la mesure de la clairance de la créatinine pour l'exploration de la fonction rénale.

2.2.4. On détermine chez une femme enceinte les paramètres suivants :

Créatininémie	160 $\mu\text{mol.L}^{-1}$
Créatininurie	16 mmol.L^{-1}
Débit urinaire	0,4 mL.min^{-1}

Valeurs physiologiques : clairance de la créatinine = 118 à 122 mL.min^{-1}
créatininémie = 60 à 120 $\mu\text{mol.L}^{-1}$

Calculer la valeur de la clairance de la créatinine chez la patiente et interpréter les résultats.

2.3 La protéinurie et ses conséquences

L'hypertension s'accompagne fréquemment de la présence de protéines dans l'urine des patientes.

BTS Analyses de Biologie Médicale		Session 2011
E4 – U41 : B.S.T.B.M. (BIOCHIMIE)	Code : 11ABE4BC1	Page : 3/7

- 2.3.1. Expliquer l'absence des protéines plasmatiques dans l'urine normale.
- 2.3.2. La fuite de protéines dans l'urine peut conduire à une hypoprotéinémie.
Donner l'ordre de grandeur de la protéinémie normale, indiquer la protéine plasmatique majoritaire ainsi que son lieu de synthèse.
- 2.3.3. L'hypoprotéinémie entraîne la formation d'œdèmes.
Présenter, à l'aide d'un schéma commenté, les échanges liquidiens mis en jeu au niveau d'un capillaire sanguin dans le cas d'une protéinémie normale.
Expliquer la formation d'un œdème en cas d'hypoprotéinémie.

3. Cholestase

(13 points)


La grossesse entraîne une compression mécanique des voies biliaires. La cholestase ainsi provoquée persiste jusqu'à l'accouchement, puis disparaît spontanément. Cette cholestase comporte un risque léthal pour le fœtus.

- 3.1. Définir le terme cholestase.
- 3.2. Donner le site de formation et l'origine moléculaire des sels biliaires. Donner la conséquence d'une cholestase sur la concentration en sels biliaires plasmatiques.
- 3.3. Préciser le rôle des sels biliaires dans la digestion des lipides.
- 3.4. L'atteinte hépatique, souvent observée, peut être suivie en déterminant la concentration d'activité catalytique (CAC) de la phosphatase alcaline sérique (PAL) selon le protocole présenté en document 3.
 - 3.4.1. Nommer la classe d'enzymes à laquelle appartient la PAL.
 - 3.4.2. Les substrats physiologiques de la PAL sont des esters monophosphoriques. Écrire la réaction générale catalysée par la PAL.
 - 3.4.3. Le PNPP est un substrat synthétique utilisé dans cette méthode. Indiquer son intérêt.
 - 3.4.4. Indiquer le rôle des composants du réactif 1.
 - 3.4.5. La méthode utilisée est une méthode dite optimisée. Justifier.
 - 3.4.6. Définir les paramètres cinétiques d'une enzyme dans des conditions opératoires données : V_{\max} et K_M . Montrer que la concentration en PNPP utilisée dans le test est adaptée au dosage de l'activité catalytique de la PAL.
Donnée : à pH = 9,8 le K_M de la PAL pour le PNPP est de $0,4 \text{ mmol.L}^{-1}$.
 - 3.4.7. Justifier la nécessité d'utiliser une cuve de mesure thermostatée.
 - 3.4.8. Donner l'expression littérale permettant de calculer la concentration d'activité catalytique en U.L^{-1} à partir du résultat expérimental $\Delta A.\text{min}^{-1}$. Préciser les unités employées et poser l'application numérique.

DOCUMENT 1 :

Dosage du glucose par méthode à la glucose oxydase (kit RTU®)

Principe :

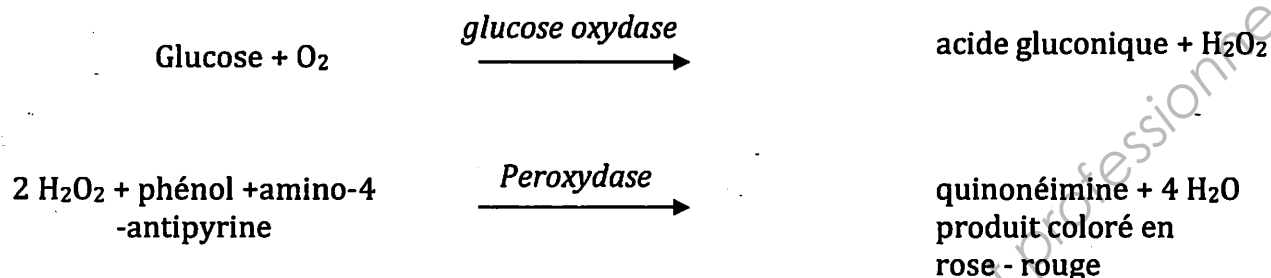

Présentation et composition du coffret :

Glucose RTU : prêt à l'emploi Stockage du coffret à 2-8° C Stabilité dans le flacon d'origine : <ul style="list-style-type: none">• 2 mois à 2-8° C• 21 jours à 20-25°C	Tampon phosphate pH 6,6	225 mmol.L ⁻¹
	Amino-4-antipyrine	0,3 mmol.L ⁻¹
	Phénol	8,5 mmol.L ⁻¹
	EDTA	5 mmol.L ⁻¹
	Peroxydase	≥ 300 U.L ⁻¹
	Glucose oxydase	≥ 10 000 U.L ⁻¹

Nature des échantillons :

sérum ou plasma recueilli sur anticoagulant. Ne pas utiliser d'échantillons visiblement hémolysés, lipémiques ou ictériques.

Mode opératoire manuel :

Réalisation du test :

longueur d'onde : 505 nm

zéro de l'appareil : blanc réactif

	Blanc réactif	Dosage
Échantillon	-	10 µL
Réactif	1 mL	1 mL
Mélanger.		
Photométrer après une incubation de :		
• 10 minutes à 37°C		
• 20 minutes à 20-25°C.		
Stabilité de la coloration : 1 heure à 20-25°C.		

Linéarité : le réactif est linéaire jusqu'à 22,2 mmol L⁻¹ (4 g.L⁻¹)

DOCUMENT 2 :
Effets de l'insuline

(À compléter et rendre avec la copie)

	Effet de l'insuline
Glycolyse	
Néoglucogénèse	
Glycogénogénèse	
Glycogénolyse	
Lipogénèse	
Lipolyse	
Captage musculaire du glucose	

DOCUMENT 3 :

d'après la fiche du kit Enzyline® PAL optimisé

Enzyline® PAL optimisé permet la détermination cinétique de l'activité phosphatase alcaline (PAL) en utilisant comme substrat le paranitrophényl phosphate (PNPP) en tampon diéthanoline et en présence d'ions Mg^{2+} comme activateur. La réaction catalysée par la PAL est la suivante :



La vitesse d'apparition du paranitrophénol (PNP) libéré est proportionnelle à l'activité PAL dans l'échantillon. Le PNP possède une absorbance spécifique à 405 nm avec $\epsilon_{405 \text{ nm}} = 1860 \text{ m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$.

Présentation et composition du coffret :

	Concentrations dans le réactif	
RÉACTIF 1	Tampon diéthanoline* pH 9,8	1,1 mol/L
	Sulfate de magnésium	0,56 mmol/L
REACTIF 2	PNPP	100 mmol/L

* La diéthanoline piège les ions phosphate inhibiteurs de la PAL

Nature des échantillons :

Sérum ou plasma recueilli sur héparinate de lithium.

Ne pas utiliser d'échantillon visiblement hémolysé, lipémique, ou ictérique.

Mode opératoire manuel :

Préparation de la solution de travail : 1 mL de Réactif 2 + 10 mL de Réactif 1

Réalisation du test :

longueur d'onde : 405 nm

zéro de l'appareil : air ou eau déminéralisée

température : 30° C ou 37° C

cuve : trajet optique 1 cm

Introduire dans une cuve de mesure thermostatée à 30° C ou 37° C :	
Solution de travail portée à 30° C ou 37° C	1 mL
Échantillon	20 μ L
Mélanger. Attendre 1 minute.	
Mesurer l'augmentation moyenne d'absorbance par minute ($\Delta A \cdot \text{min}^{-1}$) pendant 1 à 3 minutes.	

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.